


GLP-1注射 使用手順 ①



注射に必要な3点を準備します




処方された注射器を準備します

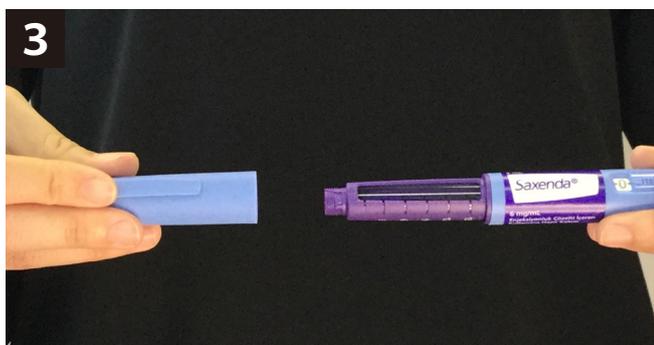

容器のキャップを外します




注射針を装着するゴム栓をアルコール綿で消毒します

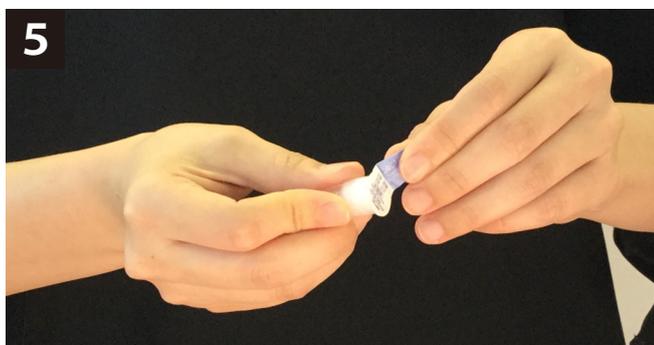

注射針のフタをはがします



フタをはがした側を本体に取り付けます

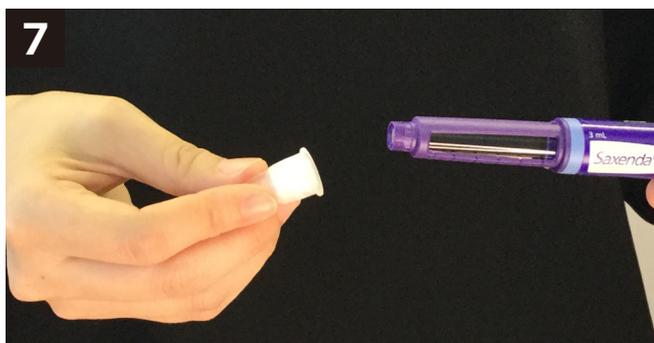


注射針をまっすぐ水平に装着します




取り付けたら、しっかりと止まるまで回してください


GLP-1注射 使用手順 ②

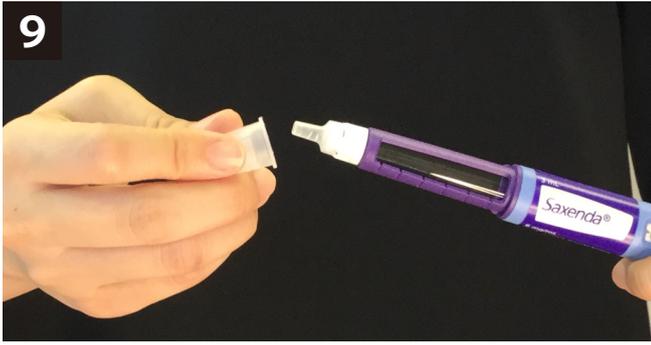

9
注射針についている先端のキャップを外します

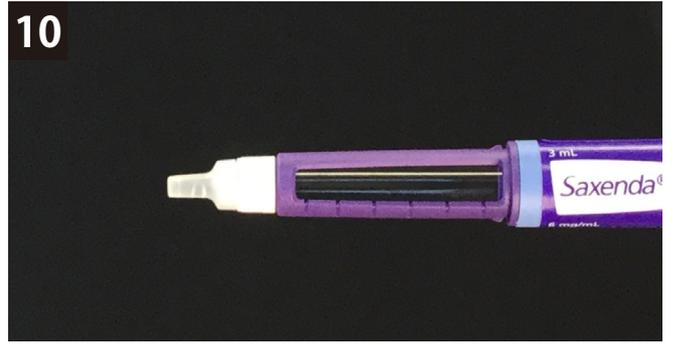

10
注射針を保護しているキャップがもう1つあります

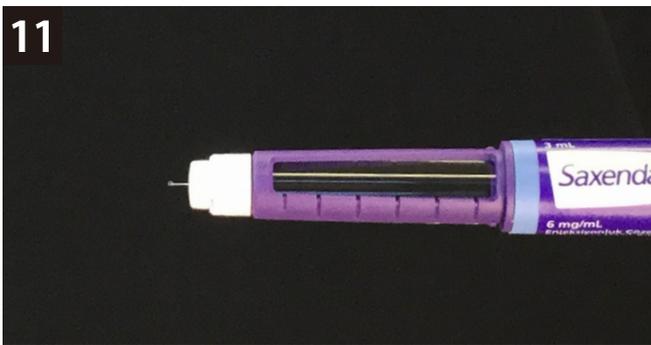

11
針が見える状態になりました



ダイヤルを少し回します



13
本体ごと立てて（針側を上に向けて）空気を抜き、トントンと叩いて、空気を上に集めます



14
ダイヤルが0.0の位置になるまでしっかりと押して空気を逃がします



15
ダイヤルを回して、投与する薬の量を設定します（量は医師の指示を厳守してください）



16
注射する箇所を消毒します

GLP-1注射 使用手順 ③

17




注射する箇所を軽くつまんで、まっすぐに針を刺します

18



ボタンを一気に押して薬を注射をします

19

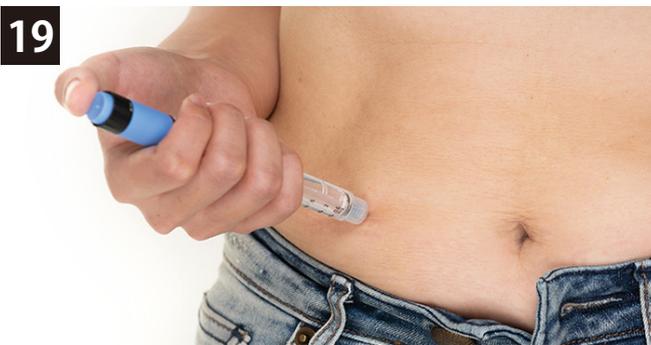

薬ができたら1~2秒待ち、ゆっくりと針を抜きます

20



極細の針を使うため、跡も残らず、出血もありません

21



注射針を保護していた2つのキャップを全て戻します

22



注射針をキャップごと回して、本体から取り外します

23



使用済みの注射針は、ペットボトル等の容器に入れて保管してください

24



使用済みの注射針は医療廃棄物になります
(お住いの地域によって処理方法が異なります) 処理方法が不明な場合は、当院までお持ちください。